

## MyWebMedical 元号対応ツール 適用手順書

### 目次

1. 元号対応ツールの設置..... 1
2. 元号対応ツールの実行..... 1

#### ■更新内容

- ・新元号「令和」対応について

MyWebMedical では患者情報[生年月日]の和暦表示に元号を使用しています。

本ツール適用により 2019 年 5 月 1 日に施行される新元号「令和」に対応します。

## 1. 元号対応ツールの設置

- ① MyWebMed\_4xx\_reiwa.exe を MyWeb サーバー上に保存してください。  
例) デスクトップ等

## 2. 元号対応ツールの実行

- ① MyWeb サーバー上に保存した MyWebMed\_4xx\_reiwa.exe を実行してください。  
※IIS の再起動、サーバ再起動は特に必要ありません。運用中の適用が可能です。
- ② アプリケーション名「myweb\_med40」が選択されていることを確認し、  
「アップデート」ボタンをクリックしてください。



MyWebMed\_Upd\_410xx

MyWeb Medicalのアプリケーションを選択し、「アップデート」ボタンをクリックしてください。  
(通常インストールのアプリケーション名は「myweb\_med40」です。  
「myweb\_med40」が2つある場合は、1つ目を選択してください。)

サイト名: Default Web Site

アプリケーション名: myweb\_med40

プール名: MywebMeAppPool


フォルダ: D:\Inetpub\fk\myweb40med\src

アップデート


☐ DB詳細情報を表示する

「myweb\_med40」が2つある場合は、1つ目を選択してください。

- ③ 「完了」 ボタンをクリックしてください。

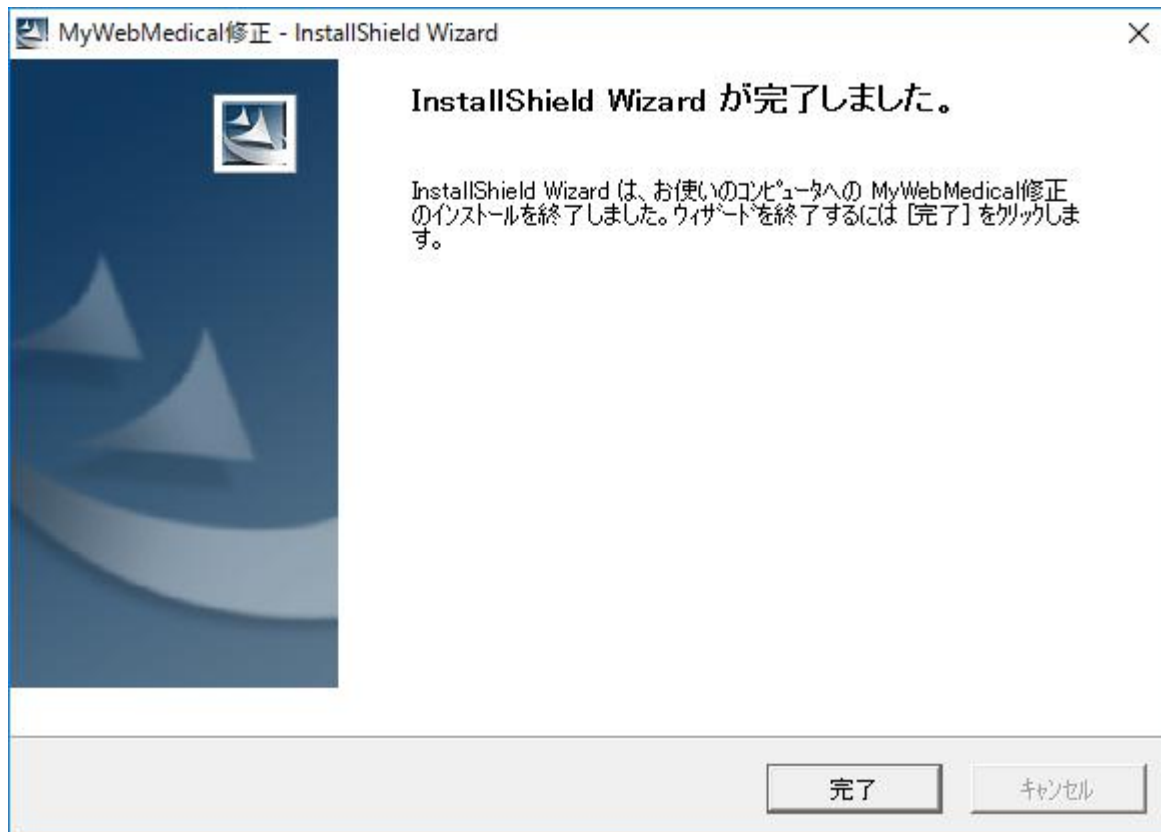

- ④ 「終了」 ボタンが表示されるまで待機し、クリックしてください。

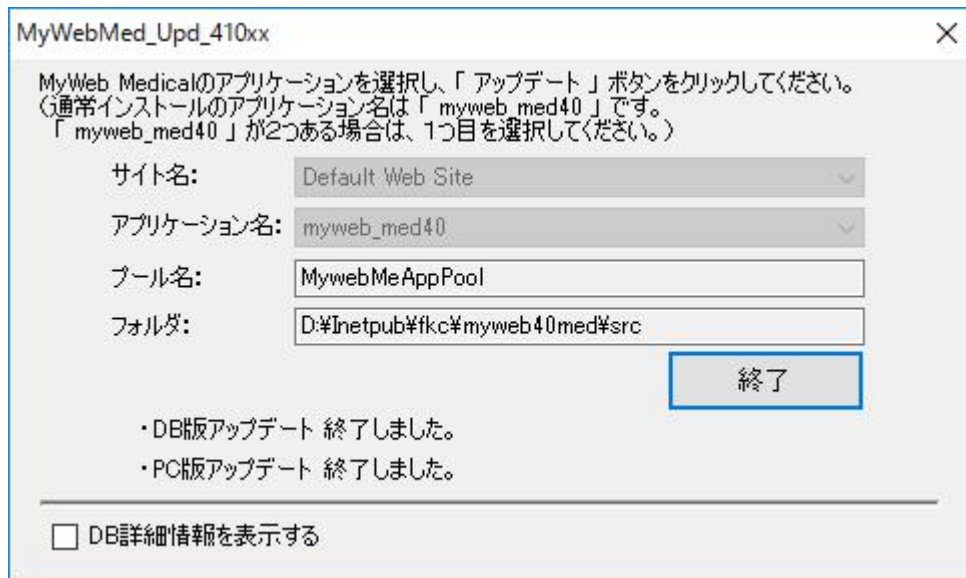

以上で完了です。